

## >Voorraadcollectie



>Flexibiliteit

>Stabiliteit

>Duurzaam

>Comfortabel

## Assortimentsoverzicht Piedro Anti-Varusschoenen


[www.piedro.com](http://www.piedro.com)

Anti-varus correctieschoenen hebben als doel om voeten met een te grote varus-, spits- en / of adductiestand te corrigeren. De correctie vindt plaats doordat eerst is uitgegaan van een bijzondere vorm van de leest. Vervolgens is een aangepaste binnenzoolconstructie aangebracht waardoor, samen met de mediale keerwand, een verdere adductie van de voet wordt tegengegaan. Tegelijkertijd wordt getracht een abductiestand te bevorderen. Vooral bij kinderen met aangeboren klompvoetjes is het belangrijk om al op jonge leeftijd met corrigerende schoenen te beginnen.

### Anti-Varus

#### De Piedro anti-varusschoen:

- > corrigeert de spitsstand in het bovenste spronggewricht (Pes equino-varus);
- > corrigeert de varuskanteling in het onderste spronggewricht en de verdere middenvoet (Pes varus);
- > bevordert abductie van de midden- en voorvoet;
- > stabiliseert de post-operatieve klompvoet;
- > verbetert de afwikkeling van de voet.

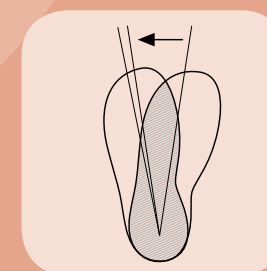

Dit is een overzicht van onze Piedro Revalidatie voorraadcollectie. Voor extra mogelijkheden verwijzen wij u graag naar Piedro Select.

Piedro Verkooporganisatie B.V.  
Jan van der Heijdenstraat 18-20  
NL-2665 JA Bleiswijk

T +31 10 521 52 11  
F +31 10 521 49 61  
E [verkoop@piedro.com](mailto:verkoop@piedro.com)  
[www.piedro.com](http://www.piedro.com)

> Piedro. Always one step ahead



## >Voorraadcollectie



→18 - 31 5

Art.nr. 2912.5600



→18 - 33 5

Art.nr. 2936.5600



→18 - 33 5

Art.nr. 2975.1602

## >Anti-Varusschoenen



→18 - 33 5

Art.nr. 2978.6509



→18 - 33 5

Art.nr. 2987.5600

De afgebeelde modellen zijn direct uit voorraad leverbaar. Wilt u de schoenen naar eigen wens samenstellen? Kijk dan in het programma van Pedro Select.

## >Leesttabel

**Piedro Bifit, Maakwijze Ago Anti-Varus**  
(hiel/bal correctie supplement)

Maat	Binnen lengte	Hoekafwijking	Wijdte 5
20	133	11,50°	15,40
21	140	11,50°	15,80
22	146	11,00°	16,20
23	153	11,00°	16,60
24	160	10,50°	17,00
25	166	10,50°	17,40
26	173	10,00°	17,80
27	179	10,00°	18,20
28	186	10,00°	18,60
29	193	9,50°	19,00
30	199	9,50°	19,40
31	206	9,00°	19,80
32	213	9,00°	20,20
33	219	8,50°	20,60
34	226	8,50°	21,00
35	233	8,50°	21,40

**Piedro Bifit, Maakwijze Flexibel Anti-Varus**  
(hiel/bal correctie supplement)

Maat	Binnen lengte	Hoekafwijking	Wijdte 5
18	117	11,00°	15,40
19	123	11,00°	15,80
20	130	10,50°	16,20
21	137	10,50°	16,60
22	143	10,50°	17,00
23	150	10,00°	17,40
24	157	10,00°	17,80
25	163	10,00°	18,20
26	170	9,50°	18,60
27	177	9,50°	19,00
28	183	9,50°	19,40
29	190	9,00°	19,80
30	197	9,00°	20,20
31	203	9,00°	20,60
32	210	8,50°	21,00
33	217	8,50°	21,40

Indien u binnenzoolpatronen wenst, kunt u ons bellen op (+31) (0) 10 521 5211, of een e-mail sturen naar [verkoop@piedro.com](mailto:verkoop@piedro.com)

